

# VITAPAN PLUS®

Information Produit/Carte de formes



Prise de teinte VITA

Communication de la teinte VITA

Reproduction de la teinte VITA

Contrôle de la teinte VITA

Edition 12.11

VITA shade, VITA made.

**VITA**


Disponible en teintes VITA SYSTEM 3D-MASTER  
(1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 4M2, 5M1)  
et VITA classical A-D (A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C2, D3, D4).



### **VITAPAN PLUS®** Plénitude intérieure. Perfection extérieure.

Le progrès est la somme de la tradition et l'innovation. Avec cette maxime, VITA a modernisé la dent classique VITAPAN et l'a mise au goût du jour. C'est avant tout valable pour les caractéristiques anatomiques qui ont encore été améliorées. Ainsi VITAPAN PLUS constitue la symbiose parfaite de l'esthétique et de la fonction.

VITAPAN PLUS est aussi le résultat d'un travail intense de VITA pour répondre à votre demande et optimiser vos procédés de fabrication tout en conservant les méthodes de travail habituelles. Vous allez ainsi gagner en sécurité, satisfaire davantage vos clients et assurer votre avenir. Conclusion : VITAPAN vous apporte encore PLUS.

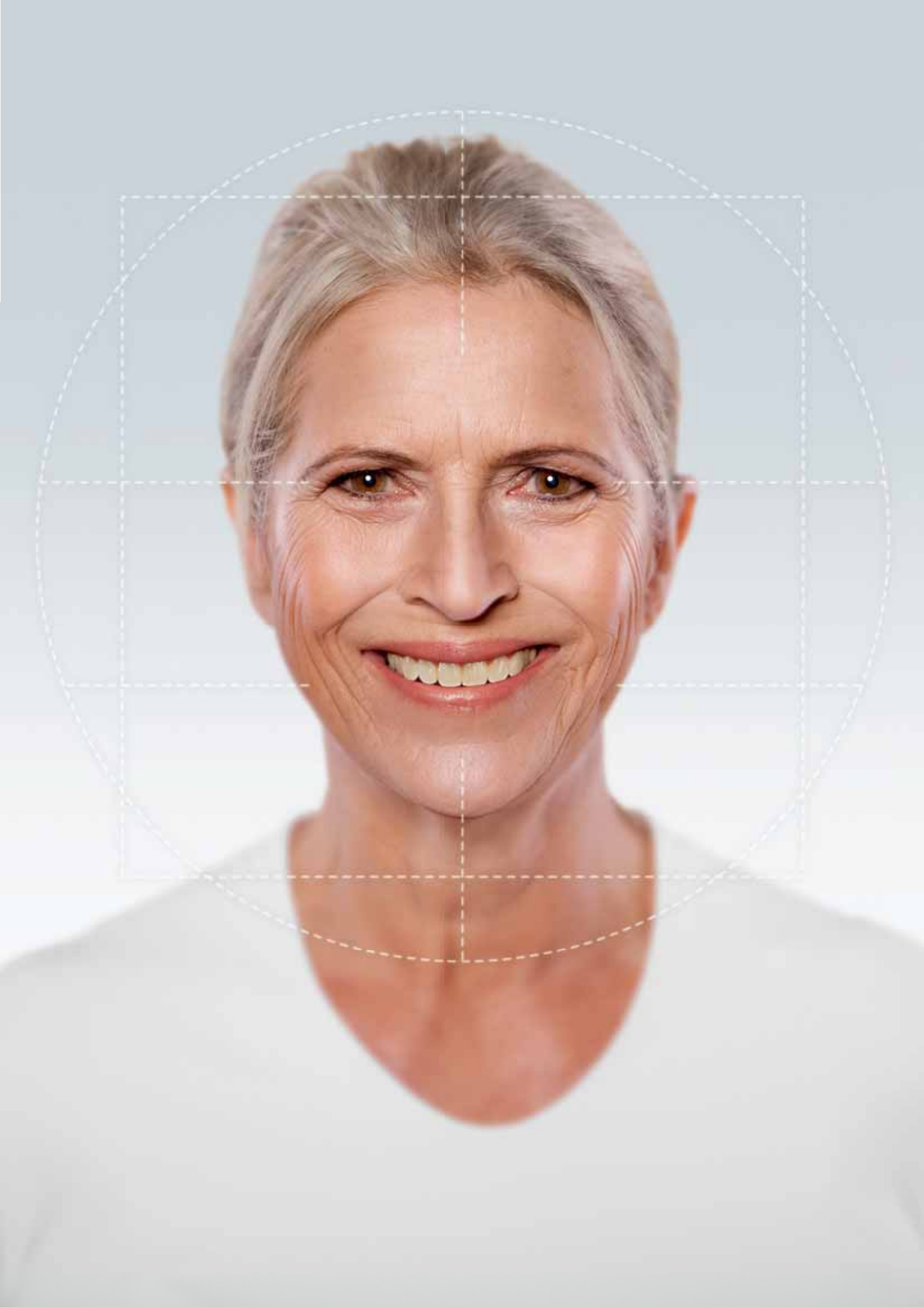

## VITAPAN PLUS® Une dent née de vos exigences

« Des innovations intéressantes qui enrichissent les possibilités de montage ».

« Des améliorations importantes et très réussies ».

« Excellente anatomie avec des caractéristiques identiques à celles de l'exemple vivant ».

« Esthétique impressionnante grâce au tracé de l'émail et à la profondeur du rendu de teinte ».

« L'état de surface et la stratification font de cette nouvelle dent un évènement ».




« VITAPAN PLUS est pour moi la solution face à l'efficacité croissante qui nous est demandée. C'est un véritable progrès ».

« VITAPAN PLUS est à mon avis une nouvelle alliée pour créer des prothèses plurifonctionnelles et anatomiques ».

« Des zones cervicales bien marquées pour une conception gingivale adaptée à l'âge et propice à une bonne hygiène ».

« Gamme de formes judicieusement étudiée avec un bon éventail de tailles ».

**VITAPAN PLUS®** Plénitude intérieure. Perfection extérieure.

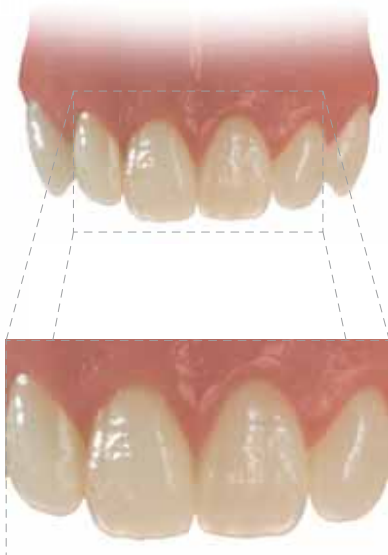

**Morphologie authentique de l'état de surface et structure personnalisée des mamelons**



pour une réflexion de la lumière empreinte de vitalité.

**Opalescence, luminescence et translucidité**



pour un jeu de couleurs riche en nuances.

**Liserés gingivaux blanchâtres**



pour une esthétique naturelle.

## VITAPAN PLUS® Plénitude intérieure. Perfection extérieure.



### Des courbures horizontales et verticales



pour un soutien efficace des lèvres et la conservation de la physionomie individuelle.



### Une conception naturelle des surfaces palatines



pour préserver la phonétique et les sensations habituelles au niveau de la langue.



### Des angulations marquées



pour un résultat esthétique et impressionnant de naturel.

### Des crêtes marginales typiques du côté vestibulaire



pour une mise en valeur de la personnalité.



### Des zones cervicales légèrement évasées avec une transition harmonieuse vers la partie coronaire



Pour une très grande polyvalence : chaque plaquette offre plusieurs possibilités pour concevoir une prothèse adaptée à l'âge, grâce à un profil gingival dont la hauteur est personnalisée.



Pour une sculpture gingivale élaborée et propice à une bonne hygiène avec une fermeture sûre des embrasures.



Pour une conception des espaces interdentaires bien proportionnée, assurant aussi un bon recouvrement des éléments de construction.

## VITAPAN PLUS® Gamme concentrée, polyvalence maximum

### VITAPAN PLUS®



Se combine avec

### VITA PHYSIODENS®



### VITA LINGOFORM®



### VITAPAN® CUSPIFORM



### VITAPAN® SYNOFORM



#### Indication de la teinte

**VITA SYSTEM 3D-MASTER®**  
(avec meilleure correspondance  
en VITA classical A1 – D4)

**VITA classical A1–D4**

#### Indication du type

**Indication de la forme**  
(la désignation décrit en  
même temps la largeur  
approximative de la  
plaquette.)




**N° de charge**  
indiqué en clair

**Data Matrix code**


CE 0124 au verso

## VITAPAN PLUS® Dents antérieures maxillaires

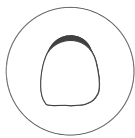


Forme ovale


**041**

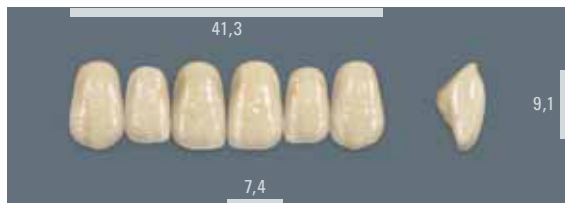


**045**

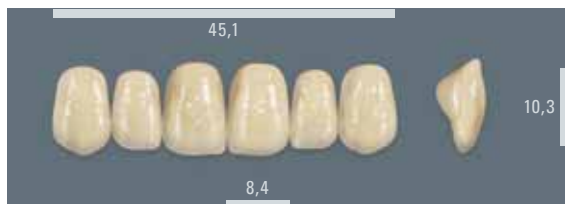

**047**

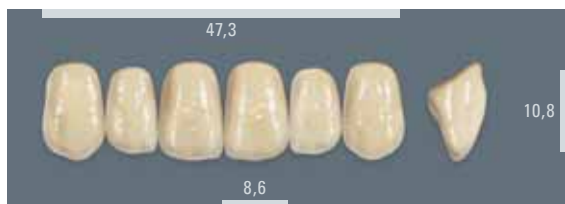

**051**

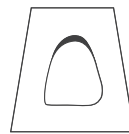

Forme triangulaire


**T44**





**T46**



**T47**

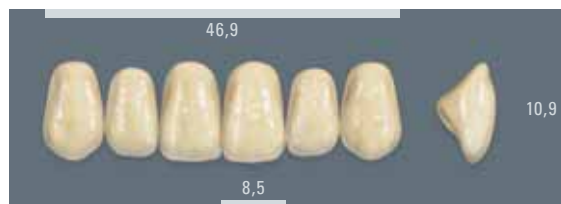


**T48**

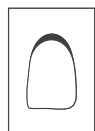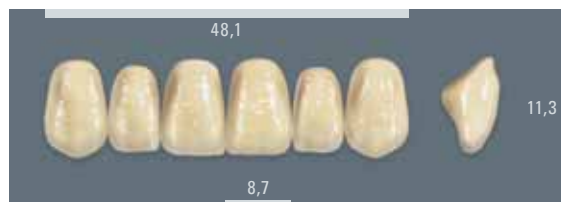


Forme rectangulaire

**R47**

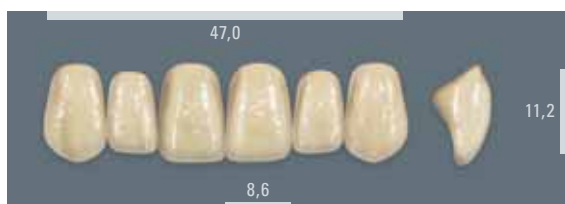

**R49**

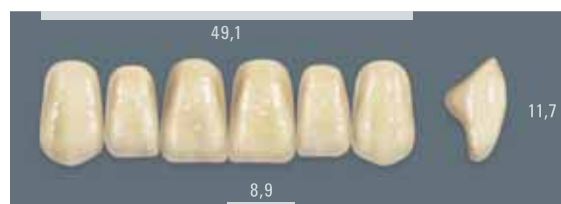


## VITAPAN PLUS® Dents antérieures mandibulaires et tableau de combinaison


**L33**



**L35**

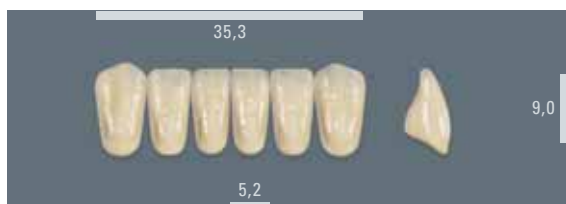

**L37**

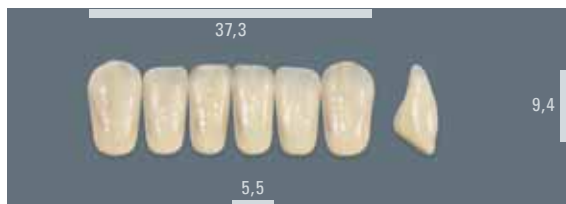




**L39**




**L41**






Nr.	 mm			Nr.	
<b>041</b>	41,3	9,1	7,4	<b>L33</b> 33,2	<b>41C 11S 20E 21L</b> 29,9 30,0 29,4 30,1 31,3 31,9 31,0 30,7
<b>045</b>	45,1	10,3	8,4	<b>L35</b> 35,3	<b>42C 12S 22E 22L</b> 31,7 31,1 32,9 31,6 33,4 32,7 33,7 32,1
<b>047</b>	47,3	10,8	8,6	<b>L37</b> 37,3	<b>42C 12S 22E 22L</b> 31,7 31,1 32,9 31,6 33,4 32,7 33,7 32,1
<b>051</b>	51,4	11,9	9,3	<b>L41</b> 41,2	<b>45C 14S 24E 24L</b> 34,8 33,1 34,8 35,8 36,3 35,4 36,1 36,4
<b>T44</b>	44,1	9,9	8,1	<b>L33</b> 33,2	<b>41C 11S 20E 21L</b> 29,9 30,0 29,4 30,1 31,3 31,9 31,0 30,7
<b>T46</b>	46,2	10,4	8,2	<b>L35</b> 35,3	<b>42C 13S 23E 22L</b> 31,7 31,3 33,5 31,6 33,4 33,9 34,6 32,1
<b>T47</b>	46,9	10,9	8,5	<b>L37</b> 37,3	<b>42C 13S 22E 22L</b> 31,7 31,3 32,9 31,6 33,4 33,9 33,7 32,1
<b>T48</b>	48,1	11,3	8,7	<b>L37</b> 37,3	<b>42C 14S 23E 22L</b> 31,7 33,1 33,5 31,6 33,4 35,4 34,6 32,1
<b>R47</b>	47,0	11,2	8,6	<b>L37</b> 37,3	<b>42C 13S 23E 22L</b> 31,7 31,3 33,5 31,6 33,4 33,9 34,6 32,1
<b>R49</b>	49,1	11,7	8,9	<b>L39</b> 39,0	<b>45C 14S 23E 23L</b> 34,8 33,1 33,5 34,2 36,3 35,4 34,6 34,8

Les données fournies dans le tableau de correspondance n'ont qu'une valeur indicative car elles varient d'un patient à l'autre.
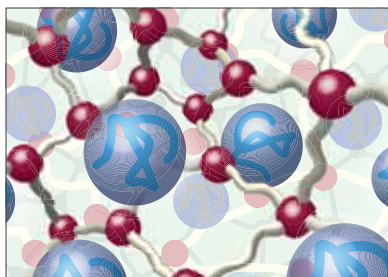
## VITAPAN PLUS® Conçue dans le meilleur matériau possible



-  Billes de PMMA, gonflées par du monomère
-  Monomère réticulé
-  Charge de micro particules anorganiques polymérisée dans le réseau polymère



VITAPAN® VITAPAN PLUS® VITA PHYSIODENS® VITA LINGOFORM®

### Dents en matériau VITA MRP – utilisées des millions de fois avec succès

- Esthétique extraordinaire
- Mise en oeuvre sûre
- Confort en bouche assuré
- Supériorité du matériau - les seules dents dont toutes les couches se composent d'un **même matériau microchargé** et dont la résistance à l'abrasion et la résistance à la rupture sont extraordinaires.


Dans le **matériau MRP (Microfiller Reinforced Polyacrylic)** conçu par VITA des micro charges anorganiques dont la répartition granulométrique est parfaitement étudiée sont polymérisées dans le réseau.

**C'est l'assurance d'avoir une dent homogène au niveau de ses propriétés et de sa qualité.**

De plus, le procédé de fabrication propre à VITA et unique VITA NPV (Procédé de pressée secondaire) procure **une structure de couches d'une totale homogénéité qui se caractérise par une cohésion interne entre le collet, la dentine et l'émail - le tout dans un seul et même matériau.**

La structure chimique procure également une haute résistance mécanique – peu importe qu'il s'agisse de prothèses à appui muqueux ou implanto-portées.

### VITA MRP – Excellentes valeurs d'abrasion

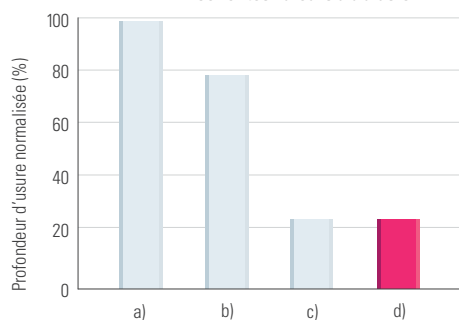

- a) PMMA réticulé
- b) PMMA très réticulé
- c) Nano composite hybride/Nano composite chargé
- d) VITA MRP

Source : tests d'usure in-vitro, Université de Regensburg, Allemagne

### Propriétés

- extraordinaire résistance à l'abrasion
- non agressif pour les muqueuses et résistant à la plaque
- stabilité chromatique
- meulage sans effritement et sans perte de la qualité en termes de teinte et de matériau
- remarquable comportement au polissage même après meulage en bouche
- liaison assurée à la résine de base

### Avantages

- processus de fabrication de la prothèse sécurisé
- patients totalement satisfaits
- valorisation de l'image du laboratoire et du cabinet dentaire

### Bénéfices

- longévité de la prothèse
- grande biocompatibilité
- excellent confort en bouche
- dans un contexte favorable, particulièrement indiqué pour les restaurations implantoportées
- très rapide acceptation de la prothèse par le patient

## Teintes



VITA SYSTEM 3D-MASTER®									
1M1	2L1.5	2M1	2M2	3L1.5	3L2.5	3M2	3R2.5	4M2	5M1
~B1	~B2	~A1	~A2	~C2/D4	~B3	~A3/D3	~A3,5	~A4	~C4



VITA classical A1–D4									
A1	A2	A3	A3.5	A4	B2	B3	C2	D3	D4

## Indications

- Prothèses complètes
- Prothèses implanto-portées
- Structures à attachements
- Prothèses à châssis métallique
- Travaux télescopes et coniques

Assortiments*	
<b>Carte de formes vivantes quadrichromie dans une boîte en aluminium</b>	10 plaquettes de 6 dents antérieures du haut + 5 plaquettes de 6 dents antérieures du bas = 90 dents
<b>Stock de dents S1</b>	48 plaquettes de 6 dents antérieures du haut + 24 plaquettes de 6 dents antérieures du bas = 432 dents
<b>Stock de dents S2 avec dents postérieures LINGOFORM®:</b>	48 plaquettes de 6 dents antérieures du haut + 24 plaquettes de 6 dents antérieures du bas = 432 dents 24 plaquettes de 8 dents postérieures du haut + 24 plaquettes de 8 dents postérieures du bas = 384 dents
<b>Stock de dents S2 avec dents postérieures VITAPAN® CUSPIFORM</b>	48 plaquettes de 6 dents antérieures du haut + 24 plaquettes de 6 dents antérieures du bas = 432 dents 24 plaquettes de 8 dents postérieures du haut + 24 plaquettes de 8 dents postérieures du bas = 384 dents
<b>Stock de dents Vario VITAPAN PLUS®, S:</b>	(134 plaquettes, 804 dents)
<b>Stock de dents Vario VITAPAN PLUS®, M:</b>	(267 plaquettes, 1602 dents)
<b>Stock de dents Vario VITAPAN PLUS®, L:</b>	(400 plaquettes, 2400 dents)

\*Pour de plus amples informations sur les spécifications du stock, consultez votre interlocuteur chez VITA ou votre dépôt.

Ce groupe de produits est disponible dans les teintes VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITA classical A1 – D4. Compatibilité chromatique garantie avec tous les matériaux VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITA classical.

Le système inédit VITA SYSTEM 3D-MASTER permet de définir d'une manière systématique toutes les teintes de dent naturelles et de les reproduire intégralement.



N.B. N.B.: Nos produits doivent être mis en oeuvre selon le mode d'emploi. Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une manipulation ou d'une mise en oeuvre incorrecte. En outre, l'utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu. Notre responsabilité ne peut être engagée si le produit est mis en oeuvre avec des matériaux et des appareils d'autres marques, non adaptés ou non autorisés. De plus, notre responsabilité quant à l'exactitude de ces données, indépendamment des dispositions légales, et dans la mesure où la loi l'autorise, se limite en tous cas à la valeur de la marchandise livrée selon facture hors taxes. En outre et dans la mesure où la loi l'autorise, notre responsabilité ne peut, en aucun cas, être engagée pour les pertes de bénéfices, pour les dommages directs ou indirects, pour les recours de tiers contre l'acheteur. Toute demande de dommages et intérêts pour faute commise (Faute lors de l'établissement du contrat, entorse au contrat, négociations illicites etc.) n'est possible qu'en cas de préméditation ou de négligence caractérisée. Date d'édition: 12/11

VITA Zahnfabrik est certifié selon la directive sur les dispositifs médicaux et les produits VITA suivants portent le marquage **CE 0124**:

**VITAPAN PLUS®**

US 5498157 A · AU 659964 B2 · EP 0591958 B1

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG  
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)